

Score[®] experts in seating

Score sorgt dafür, dass Sie komfortabel arbeiten können und sich fit fühlen, sowohl während als auch nach der Arbeit. Seit über 45 Jahren entwickeln wir ergonomische Arbeitsstühle und Zubehör, die strengen Standards entsprechen und in professionellen Umgebungen getestet sind. Dank der intensiven Zusammenarbeit mit Logopäden und der Firma Ergo-Tec entstand der Score Collum Dysphagio - ein Patientenstuhl entwickelt speziell für Untersuchungen und Behandlungen von Schluckbeschwerden.



Ihr Vertriebspartner für Medizintechnik

Seit fast 25 Jahren fertigt Ergo-Tec in Mittelfranken hochwertige Patientenlagerungssysteme, darunter Tische, Liegen, Betten und Stühle. Wir legen großen Wert auf Kundenberatung, um die optimale Ausstattung für Ihre Praxis zu finden. Unsere Produkte, einschließlich der Stühle unseres Partners Score, erleichtern Ihre Arbeit und verbessern die Patientenversorgung. Der gemeinsam mit Score entwickelte Score Collum Dysphagio unterstützt Logopäden, Therapeuten und Ärzte in ihrer Arbeit.



Der Score Collum Dysphagio

Alle Spezifikationen auf einen Blick

Höhenverstellung	546 mm - 746 mm (Verstellbereich 20 cm) mittels hydraulischer Fußpumpe
Abmessung Untergestell	700 mm x 890 mm
Rollen	Lenkrollen mit Bremse
Belastbarkeit	max. 150 kg Körpergewicht
Polster	PUxx / Stamskin
Farben	
Armlehne	Armlehne Vena [®] mehrfach verstellbar PUxx / Armlehne Vena [®] mehrfach verstellbar PU
Kopfstützen	Nackenstütze / Flache Kopfstütze
Optional	Fußbedienung zur Sitzverstellung
	Zentrale Fußbremse an den Vorderrädern
	Höhenverstellbare Fußstütze Score Pro952

Vollständiger ergonomischer Komfort


Perfekte Kombinationen für optimale Ergebnisse

Wollen Sie alle ergonomischen Vorteile nutzen, die Score zu bieten hat? Der Score Collum Dysphagio lässt sich perfekt mit einem Score Sattelstuhl oder einem Hocker aus unserer Medical Line kombinieren.

In dieser Kombination sind sowohl Patient als auch Behandler mit einer ausgezeichneten Sitzlösung ausgestattet. Daher ist der Score Collum Dysphagio auch als Set erhältlich.



+

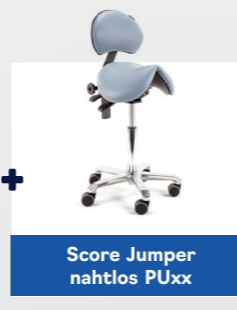

Score Jumper
nahtlos PUxx

+



Score Medical Ergo
Shape nahtlos PUxx

Der Score Collum Dysphagio ist ein Score Produkt.



Gewerbestraße 2
91489 Wilhelmsdorf
Deutschland

09104/82969 97
sales@ergo-tec.com
www.et-medical.eu

Score[®]
experts in seating



Neu! Der Score Collum Dysphagio

Der Patientenstuhl
für Logopädie
und Dysphagio





**Sören Paul MSc, Therapie-
wissenschaftler, Fachtherapeut
für Dysphagie, Zertifizierter FEES-
Ausbilder der DGN, DSG und DGG**

“Wir gebrauchen den Score Collum Dysphagio bereits seit vielen Jahren in unserer Praxis und sind absolut überzeugt von diesem Stuhl! Besonders Patienten, die rumpfinstabil sind, können wir sehr einfach von der sitzenden in die liegende Position umlagern und umgekehrt. Da der Collum Dysphagio flexibel einsetzbar ist, wird er sehr einfach von einem Behandlungsraum in den nächsten gerollt.”

Die richtige Unterstützung bei der Behandlung von Dysphagie

Als Logopäde, Arzt oder Therapeut möchten Sie, dass Ihre Patienten bei Ihnen in guten Händen sind. Sie müssen auf einem stabilen, zuverlässigen Stuhl Platz nehmen können, damit sie sich während einer Untersuchung oder Behandlung so wohl wie möglich fühlen. Der Score Collum Dysphagio ist ein Medizinprodukt gemäß MDR (EU) 2017/745, das gemeinsam mit Logopäden entwickelt wurde.

Die richtige Unterstützung bei Dysphagie, Nasen-Rachen-Endoskopie und Schluckrehabilitation

Der Score Collum Dysphagio ist mit einer Nackenstütze ausgestattet, die Stabilität und Sicherheit bei endoskopischen (FEES-) Untersuchungen bietet. Der Stuhl erleichtert die Untersuchung und Behandlung, macht sie komfortabler und sicherer, insbesondere für Patienten mit Schluckproblemen oder Dysphagie.

Dank der auswechselbaren flachen Kopfstütze können Patienten einfach in eine liegende Position gebracht werden.

Schluckrehabilitationsübungen, wie zum Beispiel das Shaker-Manöver, sind dann einfach und sicher ausführbar.

Darüber hinaus eignet sich der Score Collum Dysphagio für die Behandlung und Therapie von Patienten, die aufgrund eines Schlaganfalls oder einer neurodegenerativen Erkrankung in ihrer körperlichen Mobilität eingeschränkt sind.

Wichtigste Funktionen des Score Collum Dysphagio

Der Score Collum Dysphagio ist mit allen Verstellmöglichkeiten ausgestattet, die Sie als Logopäde oder HNO-Arzt benötigen. Gleichzeitig ist der Stuhl relativ einfach aufgebaut.

In vollständig horizontaler Position kann der Score Collum Dysphagio auch als Behandlungsliege eingesetzt werden, z.B. für das Shaker-Manöver.

Kompakter Patientenstuhl mit fahrbarem Untergestell zum einfachen Verschieben. Passt durch Standard-Türöffnungen.

Die hydraulische Höhenverstellung sorgt dafür, dass Sie sich als Behandler sowohl im Sitzen als auch im Stehen ergonomisch Ihrem Patienten nähern können.

Die mehrfach verstellbare Nackenstütze kann mit wenigen Handgriffen gegen eine flache Kopfstütze ausgetauscht werden.

Der Stuhl kann leicht nach hinten geneigt werden, während die höhen- und tiefenverstellbare Nackenstütze den Hals des Patienten während einer FEES-Untersuchung und Schluckübungen stabil hält.

Verstellbare Armlehnen, nach hinten schwenkbar zum einfachen Patiententransfer zwischen Rollstuhl und Behandlungsstuhl.

Hochwertige Polsterung aus PUxx oder Stamskin-Kunstleder (geeignet für medizinische Anwendungen).

